

*Un maître dans l'art
des microcathéters*

MERIT
Maestro® MICROCATHÉTER



MERIT MAESTRO®

MICROCATHÉTER

Un microcathéter polyvalent conçu pour les vaisseaux périphériques et coronaires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PARTIE DISTALE FLEXIBLE 20 CM

conçue pour une insertion atraumatique dans les vaisseaux

REVÊTEMENT DISTAL HYDROPHILE 80 CM

pour une progression aisée dans les anatomies tortueuses

MARQUEUR RADIO-OPAQUE

pour une identification facile de l'embout distal du cathéter. Situé à 1,3 mm en amont de l'extrémité distale

NOUVELLE CONFIGURATION EN COL DE CYGNE

Haute performance de l'extrémité distale préformée

Idéale pour accéder à l'artère hépatique




(2) seringues Medallion® de 3 ml incluses pour faciliter le mélange d'emboles/



NOUVEAU

CONFIGURATION EN COL DE CYGNE DE MERIT MEDICAL

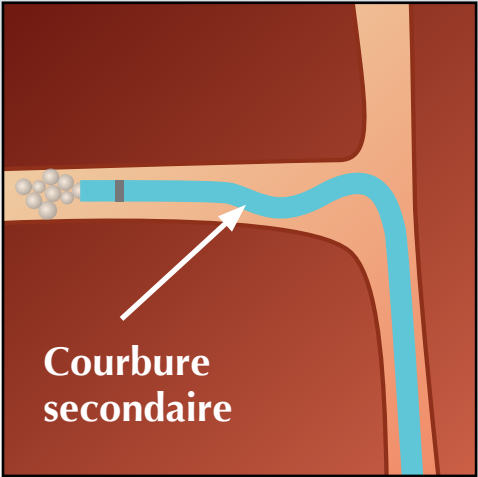

Modèle fabriqué avec une configuration pré-formée en Col de Cygne

Une fois que l'extrémité du cathéter en col de cygne est en place dans le vaisseau, la courbure secondaire aide à stabiliser le cathéter dans le vaisseau en réduisant l'effet de recul provoqué par l'agent embolique lors de son introduction.

MERIT MAESTRO[®]

MICROCATHÉTER

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence catalogue	Corps Proximal	Corps Distal	Longueur cm	Diamètre Extrémité	Fil-guide interne	Cathéter-guide compatible
recommandé						
28MC24110ST	2,8 F	2,4 F	110	Droit	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC24130ST	2,8 F	2,4 F	130	Droit	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC24150ST	2,8 F	2,4 F	150	Droit	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC2411045	2,8 F	2,4 F	110	45 degrés	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC2413045	2,8 F	2,4 F	130	45 degrés	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC2415045	2,8 F	2,4 F	150	45 degrés	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC24110SN	2,8 F	2,4 F	110	Col de cygne	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC24130SN	2,8 F	2,4 F	130	Col de cygne	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC24150SN	2,8 F	2,4 F	150	Col de cygne	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC28110ST	2,8 F	2,8 F	110	Droit	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC28130ST	2,8 F	2,8 F	130	Droit	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC28150ST	2,8 F	2,8 F	150	Droit	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC2811045	2,8 F	2,8 F	110	45 degrés	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC2813045	2,8 F	2,8 F	130	45 degrés	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC2815045	2,8 F	2,8 F	150	45 degrés	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm) 0,040" (1,02 mm)
28MC28110SN	2,8 F	2,8 F	110	Col de cygne	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm) 0,040" (1,02 mm)



EMBOLES

	Particules	Sphériques	Coils
2,8 F / 2,4 F	Emboles ≤ 700 µm	Microsphères ≤ 700 µm	0,46 mm / 0,018"
2,8 F / 2,8 F	Emboles ≤ 700 µm	Microsphères ≤ 700 µm	0,46 mm / 0,018"
2,9 F / 2,9 F	Emboles ≤ 900 µm	Microsphères ≤ 900 µm	



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT
 Merit Medical EUROPE, AFRICA AND THE MIDDLE EAST (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Pays-Bas • Tél.: +31 43 358 82 22
 Merit Medical France, 136, Avenue Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France • Tél. : +33 (0)1 30 57 24 24 • Fax: +33 (0)1 30 57 43 43
 Merit Medical Ireland Ltd. • Parkmore Business Park West • Galway, Irlande • +353 (0) 91 703 733
 Téléphone gratuit pour certains pays : Autriche 0800 295 374 • Belgique 0800 72 906 (néerlandais) 0800 73 172 (français) • Danemark 80 88 00 24
 France 0800 91 60 30 • Allemagne 0800 182 0871 • Irlande (République) 1800 553 163 • Luxembourg 8002 25 22
 Pays-Bas 0800 022 81 84 • Suède 020 792 445 • Royaume-Uni 0800 973 115