

*Um mestre na arte dos  
microcateteres.*

MERIT  
Maestro® MICROCATHETER



# MERIT MAESTRO<sup>®</sup>

## MICROCATHETER

*Um Microcateter Multipurpose  
destinado a vasos periféricos e coronários.*

### FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS

#### **REGIÃO DISTAL FLEXÍVEL 20 CM**

*desenvolvido para entrada atraumática no vaso.*

#### **REVESTIMENTO HIDROFÍLICO DISTAL 80 CM**

*para melhor navegabilidade em anatomias tortuosas.*

#### **MARCADOR RADIOPACO**

*para fácil identificação da ponta distal do cateter.*

*Localizado a 1,3 mm proximal em relação à ponta distal*

#### **NOVO DESIGN SWAN NECK**

*elevado desempenho da ponta distal pré-moldada ideal para acesso à artéria hepática*



(2) Seringas 3 ml Medallion<sup>®</sup> inclusas para facilitar misturas embólicas/esferas






**NOVO**

**DESIGN SWAN NECK  
MERIT MEDICAL**

*Ponta com design  
pré-moldado  
Swan Neck*

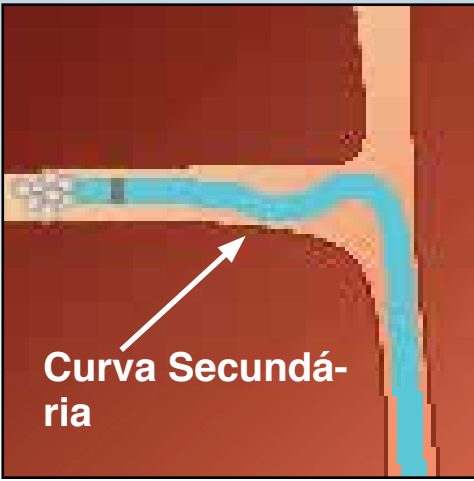


*Quando a ponta do  
Cateter Swan Neck está  
posicionada no vaso, a  
curva secundária ajuda  
a manter o cateter  
no local, reduzindo  
o efeito de retorno  
do agente embólico,  
à medida que é  
introduzido.*

# MERIT MAESTRO<sup>®</sup>

## MICROCATHETER

### CÓDIGOS PARA PEDIDOS

Código	Proximal	Distal	Comprimento		Diâmetro Interno	Fio Guia	Cateter Guia Indicado
			cm	Ponta			
<b>2 . 8 F A F U N I L A D A P A R A 2 . 4 F</b>							
28MC24110ST	2.8F	2.4F	110	Reta	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC24130ST	2.8F	2.4F	130	Reta	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC24150ST	2.8F	2.4F	150	Reta	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC2411045	2.8F	2.4F	110	45° graus	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC2413045	2.8F	2.4F	130	45° graus	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC2415045	2.8F	2.4F	150	45° graus	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC24110SN	2.8F	2.4F	110	Swan Neck	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC24130SN	2.8F	2.4F	130	Swan Neck	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC24150SN	2.8F	2.4F	150	Swan Neck	0,020" (0,52 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,040" (1,02 mm)
<b>2 . 8 F</b>							
28MC28110ST	2.8F	2.8F	110	Reta	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC28130ST	2.8F	2.8F	130	Reta	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC28150ST	2.8F	2.8F	150	Reta	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC2811045	2.8F	2.8F	110	45° graus	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC2813045	2.8F	2.8F	130	45° graus	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC2815045	2.8F	2.8F	150	45° graus	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC28110SN	2.8F	2.8F	110	Swan Neck	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC28130SN	2.8F	2.8F	130	Swan Neck	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
28MC28150SN	2.8F	2.8F	150	Swan Neck	0,024" (0,62 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,040" (1,02 mm)
<b>2 . 9 F</b>							
29MC29110ST	2.9F	2.9F	110	Reta	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)
29MC29130ST	2.9F	2.9F	130	Reta	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)
29MC29150ST	2.9F	2.9F	150	Reta	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)
29MC2911045	2.9F	2.9F	110	45° graus	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)
29MC2913045	2.9F	2.9F	130	45° graus	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)
29MC2915045	2.9F	2.9F	150	45° graus	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)
29MC29110SN	2.9F	2.9F	110	Swan Neck	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)
29MC29130SN	2.9F	2.9F	130	Swan Neck	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)
29MC29150SN	2.9F	2.9F	150	Swan Neck	0,027" (0,68 mm)	0,021" (0,53 mm)	0,042" (1,07 mm)

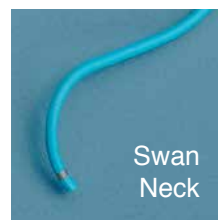

Todos os Microcateres Maestro da Merit estão classificados para pressão dinâmica de infusão de 800psi.

	EMBÓLICO		Molas
	Partículas	Esferas	
2.8F / 2.4F	≤700 um Emból.	≤700 um Microesferas	0,46mm / 0,018"
2.8F / 2.8F	≤700 um Emból.	≤700 um Microesferas	
2.9F / 2.9F	≤900 um Emból.	≤900 um Microesferas	



Merit Medical do Brasil • Av Eng. Luís Carlos Berrini, 1500 • 10º andar cj 101 • 04571-934- São Paulo- SP • Brasil • Tel- +55 11 4561-0062 • Tel- +55 11 4561-0063

Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

www.merit.com

Merit Medical EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Holanda • Tel: +31 43 358 82 40

Número verde para país específico:

Áustria 0800 295374 • Bélgica 0800 729 06 (Holandês) 0800 731 72 (Francês) • Dinamarca 80 88 00 24 • França 0800 91 60 30 • Alemanha 0800 182 08 71

República da Irlanda 1800 553 163 • Luxemburgo 8002 25 22 • Holanda 0800 022 8184 • Suécia 020 79 24 45 • Reino Unido 0800 973 115 • Finlândia 00800 6374 8633

Patente norte-americana Nº 6,808,380 e JP3386802

401840008-A ID 092413